




PROFLEX® WRIST SUPPORTS


400/405

- 1. Wrap strap around entire wrist.
- 2. Secure in place with the hook-and-loop closure. Use on right or left hand.

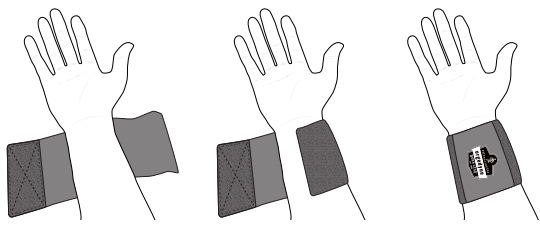


415

- 1. Feed strap through grommet.
- 2. Slip over hand to wrist just below palm.
- 3. Wrap strap around wrist, until the level of support feels comfortable. Use on right or left hand.

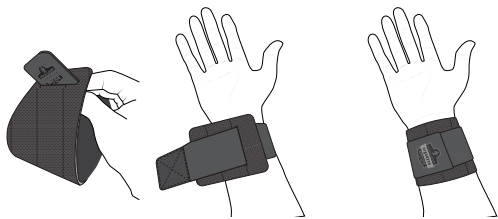


425

- 1. Insert thumb into hole.
- 2. Wrap support past palm, over the top of hand.
- 3. Loop around the wrist to secure.
- 4. Alternatively, wrap across the top of hand and then past palm before looping around the wrist to secure. Use on right or left hand.

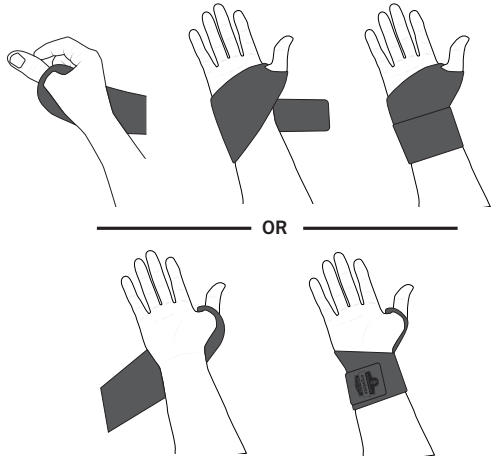


660

- 1. Insert hand into single opening end of support, feeding thumb through the small hole and remaining fingers through the larger opening.
- 2. Tug at base of wrist until material is even. Use on right or left hand.

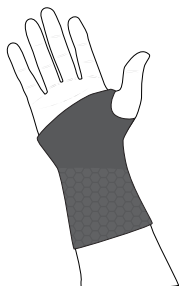


670/675

- 1. Slip hand and thumb through opening.
- 2. Place removable strap with loop to hook so the strap lays away from the body.
- 3. Pull strap underneath to wrist side and then over the back of the wrist.
- 4. Fasten hook-and-loop closure(s) to secure in place. Use on right or left hand.

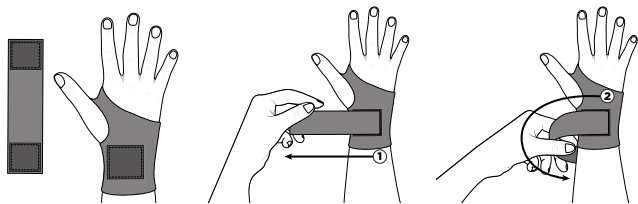


680/685

- 1. With the elastic loops undone, insert hand into single opening end of support, feeding thumb through the small hole and remaining fingers through the larger opening.
- 2. Tug at base of wrist until material is even.
- 3. Wrap elastic strap(s) around wrist until the level of support feels comfortable. Use on right or left hand.

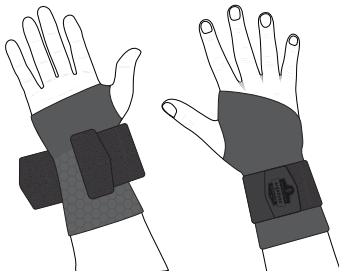


4000/4010

- 1. Place around wrist (right or left, as stated) aligning the wrist to the orange line indicator.
- 2. Fasten hook-and-loop closure on back of wrist.
- 3. Place palm strap between thumb and index finger. Attach end of strap to hook-and-loop closure on back of wrist.
- 4. Wrap elastic strap across top of the wrist and fasten at desired tension. Right or left hand support must be used on correct hand.

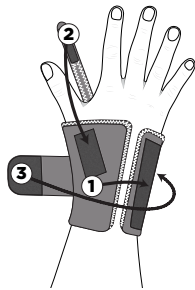


4005/4015

- 1. With the elastic straps undone, insert hand into single opening end of support, feeding your thumb through the small hole and remaining fingers through the larger opening.
- 2. Tug at base of wrist until thumb is completely through.
- 3. Wrap elastic strap(s) around wrist until the level of support feels comfortable. Right or left hand support must be used on correct hand.

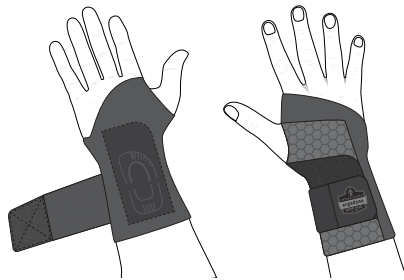

4020

- 1. Loosen closure.
- 2. Slide hand (left or right, as stated) through bottom opening of wrist support. Position palm strap between thumb and index finger.
- 3. Pull closure tab up and toward the inside of the wrist to meet hook-and-loop closure. Fasten at desired tension. Right or left hand support must be used on correct hand.

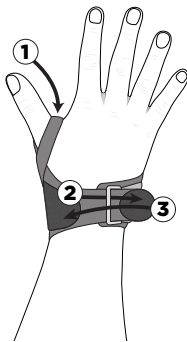

CARE INSTRUCTIONS:

Machine wash cold; air dry.

* We cannot guarantee wearing personal protective equipment will prevent injury.

MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

AUTHORIZED UK REPRESENTATIVE

Authorised Rep Compliance Ltd.
Arc House, Thurnham
Lancaster, LA2 0DT, UK
Tel. +44 1524 805288

AUTHORIZED EU REPRESENTATIVE

Authorised Rep Compliance Ltd.
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street
Dublin, D02 P593, Ireland
Tel. +353 151 33758




SOPORTES PARA LA MUÑECA PROFLEX®

400/405


- Envuelva la correa alrededor de toda la muñeca.
- Asegúrela con el cierre de presilla y gancho.

Apto para diestros o para zurdos.

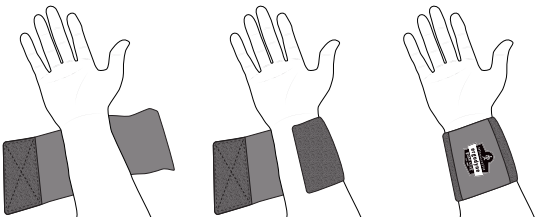


415

- Pase la correa por el ojal.
- Deslice la mano hasta la muñeca, justo debajo de la palma.
- Envuelva la correa alrededor de la muñeca hasta que el nivel de soporte sea cómodo. Apto para diestros o para zurdos.

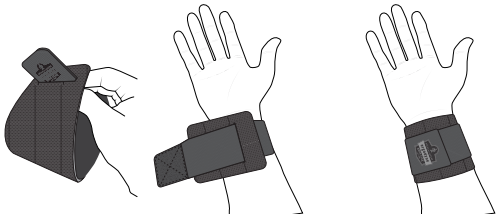


425

- Inserte el pulgar en el orificio.
- Envuelva el soporte por delante de la palma y sobre la parte superior de la mano.
- Enróllelo alrededor de la muñeca para asegurarlo.
- También puede envolverlo a lo largo de la parte superior de la mano y luego por delante de la palma antes de enrollarlo alrededor de la muñeca para asegurarlo. Apto para diestros o para zurdos.

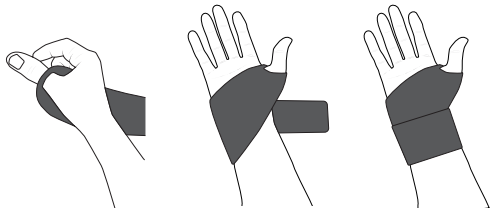


OR

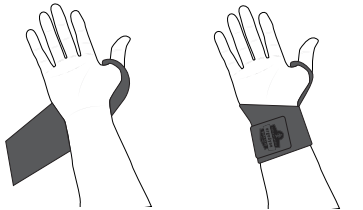


660

- Inserte la mano en la abertura simple que está en el extremo del soporte, pasando el pulgar a través del orificio pequeño y los demás dedos a través de la abertura más grande.
- Tire en la base de la muñeca hasta que el material se vea uniforme. Apto para diestros o para zurdos.

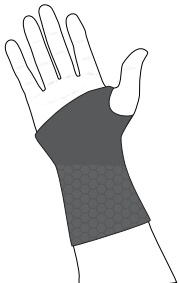


670/675

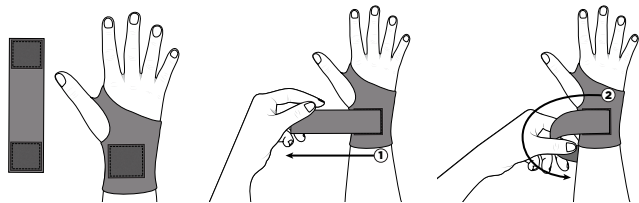

- Deslice la mano y el pulgar a través de la abertura.
- Coloque la correa extraíble con la presilla apuntado hacia el gancho para que la correa quede alejada del cuerpo.
- Jale la correa por debajo hacia el lado de la muñeca y luego sobre la parte posterior de la muñeca.
- Sujete el (los) cierre(s) de presilla y gancho para asegurarlo(s). Apto para diestros o para zurdos.


680/685

- Con las presillas elásticas sueltas, inserte la mano en la abertura simple que está en el extremo del soporte, pasando su pulgar a través del orificio pequeño y los demás dedos a través de la abertura más grande.
- Tire en la base de la muñeca hasta que el material se vea uniforme.
- Envuelva la (las) correa(s) elástica(s) alrededor de la muñeca hasta que el nivel de soporte sea cómodo. Apto para diestros o para zurdos.

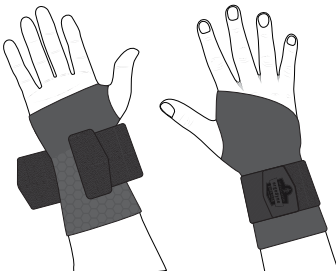


4000/4010

- Colóquelo alrededor de la muñeca (la derecha o la izquierda, según se indica), alineando la muñeca con el indicador de la línea de color naranja.
- Sujete el cierre de presilla y gancho en la parte posterior de la muñeca.
- Coloque la correa de la palma entre el pulgar y el dedo índice. Fije el extremo de la correa al cierre de presilla y gancho en la parte posterior de la muñeca.
- Envuelva la correa elástica a lo largo de la parte superior de la muñeca y sujétela con la tensión deseada. Los soportes para diestros o para zurdos se deben usar en la mano correcta.

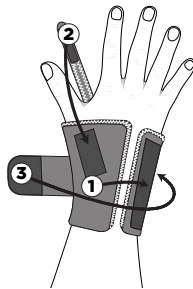


4005/4015

- Con las correas elásticas sueltas, inserte la mano en la abertura simple que está en el extremo del soporte, pasando su pulgar a través del orificio pequeño y los demás dedos a través de la abertura más grande.
- Tire en la base de la muñeca hasta que el pulgar pase por completo.
- Envuelva la (las) correa(s) elástica(s) alrededor de la muñeca hasta que el nivel de soporte sea cómodo. Los soportes para diestros o para zurdos se deben usar en la mano correcta.

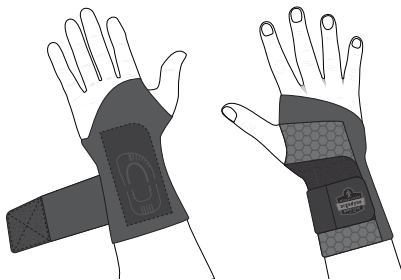

4020

- Afloje el cierre.
- Deslice la mano (la derecha o la izquierda, según se indica) a través de la abertura que está en la parte inferior del soporte para la muñeca. Posicione la correa de la palma entre el pulgar y el dedo índice.
- Jale la lengüeta de cierre hacia arriba y hacia el interior de la muñeca hasta alcanzar el cierre de presilla y gancho. Sujete con la tensión deseada. Los soportes para diestros o para zurdos se deben usar en la mano correcta.

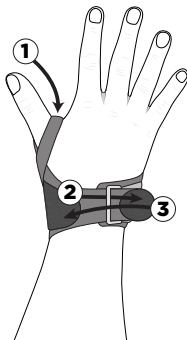

INSTRUCCIONES SOBRE EL CUIDADO:

Lavable a máquina con agua fría; dejar secar al aire.

* No podemos garantizar que el uso del equipo de protección personal evitará lesiones.

MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

AUTHORIZED UK REPRESENTATIVE

Authorised Rep Compliance Ltd.
Arc House, Thurnham
Lancaster, LA2 0DT, UK
Tel. +44 1524 805288

AUTHORIZED EU REPRESENTATIVE


Authorised Rep Compliance Ltd.
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street
Dublin, D02 P593, Ireland
Tel. +353 151 33758



PROTÈGE-POIGNET PROFLEX®


400/405

- 1. Enroulez la sangle autour du poignet.
- 2. Fixez l'attache auto-agrippante. Adapté à la main droite comme à la main gauche.

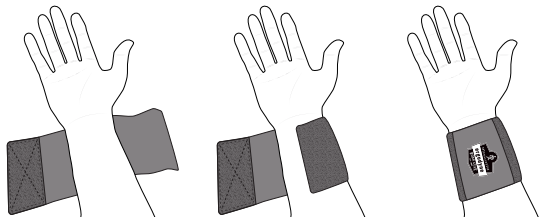


415

- 1. Glissez l'extrémité de la sangle dans l'œillet.
- 2. Enfilez le protège-poignet jusque sous la paume.
- 3. Enroulez la sangle autour du poignet de manière à assurer un maintien confortable. Adapté à la main droite comme à la main gauche.

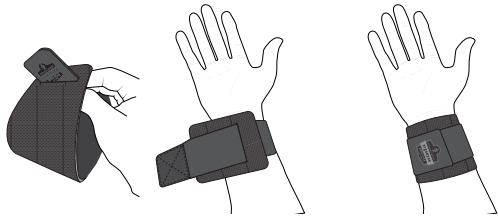

425


- 1. Insérez le pouce dans l'œillet.
- 2. Faites passer la sangle sur votre paume, puis sur le dos de la main.
- 3. Enroulez autour du poignet pour fixer la sangle.
- 4. Vous pouvez également faire passer la sangle à l'arrière de la main, puis sur la paume avant de l'enrouler autour du poignet et de la fixer. Adapté à la main droite comme à la main gauche.

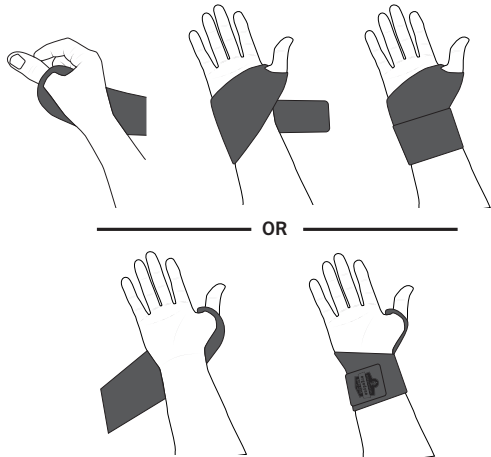

OR


660

- 1. Glissez la main dans le protège-poignet, placez le pouce dans la petite ouverture et les autres doigts dans l'ouverture plus grande.
- 2. Tirez la sangle sur le poignet jusqu'à obtenir un maintien uniforme. Adapté à la main droite comme à la main gauche.

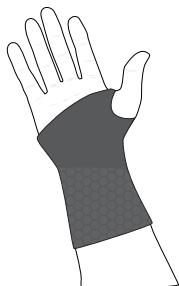


670/675

- 1. Glissez la main et le pouce dans l'ouverture.
- 2. Placez la sangle amovible avec la boucle sur le crochet de manière à éloigner la sangle du corps.
- 3. Tirez la sangle jusque sur le côté du poignet, puis sur l'arrière du poignet.
- 4. Fixez l'attache auto-agrippante. Adapté à la main droite comme à la main gauche.

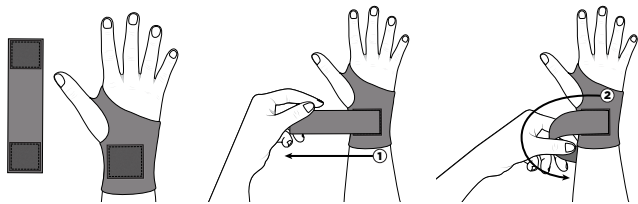


680/685

- 1. Défaitez les attaches élastiques, glissez le protège-poignet, placez le pouce dans la petite ouverture et les autres doigts dans l'ouverture plus grande.
- 2. Tirez la sangle sur le poignet jusqu'à obtenir un maintien uniforme.
- 3. Enroulez les sangles élastiques autour du poignet de manière à assurer un maintien confortable. Adapté à la main droite comme à la main gauche.

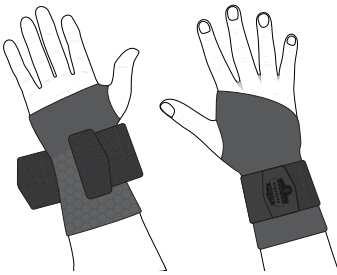


4000/4010

- 1. Enfilez le protège-poignet autour du poignet (droit ou gauche, selon les indications), en alignant le poignet sur la ligne orange.
- 2. Fixez les attaches auto-agrippantes au dos du poignet.
- 3. Placez la sangle de la paume entre le pouce et l'index. Fixez l'extrémité de la sangle aux attaches auto-agrippantes au dos du poignet.
- 4. Enroulez la sangle élastique sur le poignet et serrez-la selon la tension désirée. Utilisez le protège-poignet correspondant au poignet à protéger.

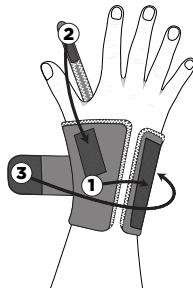


4005/4015

- 1. Défaitez les attaches élastiques, glissez le protège-poignet, placez le pouce dans la petite ouverture et les autres doigts dans l'ouverture plus grande.
- 2. Tirez la sangle sur le poignet jusqu'à ce que le pouce soit complètement passé dans l'ouverture.
- 3. Enroulez les sangles élastiques autour du poignet de manière à assurer un maintien confortable. Utilisez le protège-poignet correspondant au poignet à protéger.

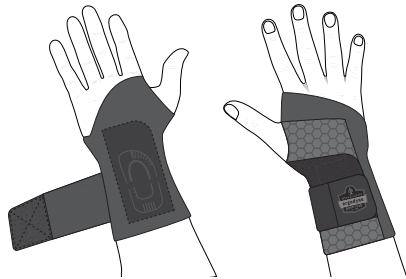

4020

- 1. Desserrez l'attache.
- 2. Glissez la main (droite ou gauche, selon les indications) dans l'ouverture du bas. Placez la sangle de la paume entre le pouce et l'index.
- 3. Tirez la languette de l'attache vers le haut et vers l'intérieur du poignet pour la fixer à l'attache auto-agrippante. Serrez à la tension désirée. Utilisez le protège-poignet correspondant au poignet à protéger.

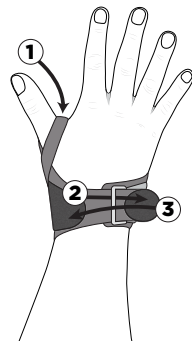

ENTRETIEN :

Lavage à froid en machine ; séchage à l'air libre.

*Nous ne pouvons pas garantir que le port d'un équipement de protection individuelle évite toute blessure.

MANUFACTURER

Ergodyne
1021 Bandana Boulevard East, Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108
+1.800.225.8238

AUTHORIZED UK REPRESENTATIVE

Authorised Rep Compliance Ltd.
Arc House, Thurnham
Lancaster, LA2 0DT, UK
Tel. +44 1524 805288

AUTHORIZED EU REPRESENTATIVE

Authorised Rep Compliance Ltd.
Ground Floor, 71 Lower Baggot Street
Dublin, D02 P593, Ireland
Tel. +353 151 33758